


BRUKSANVISNING

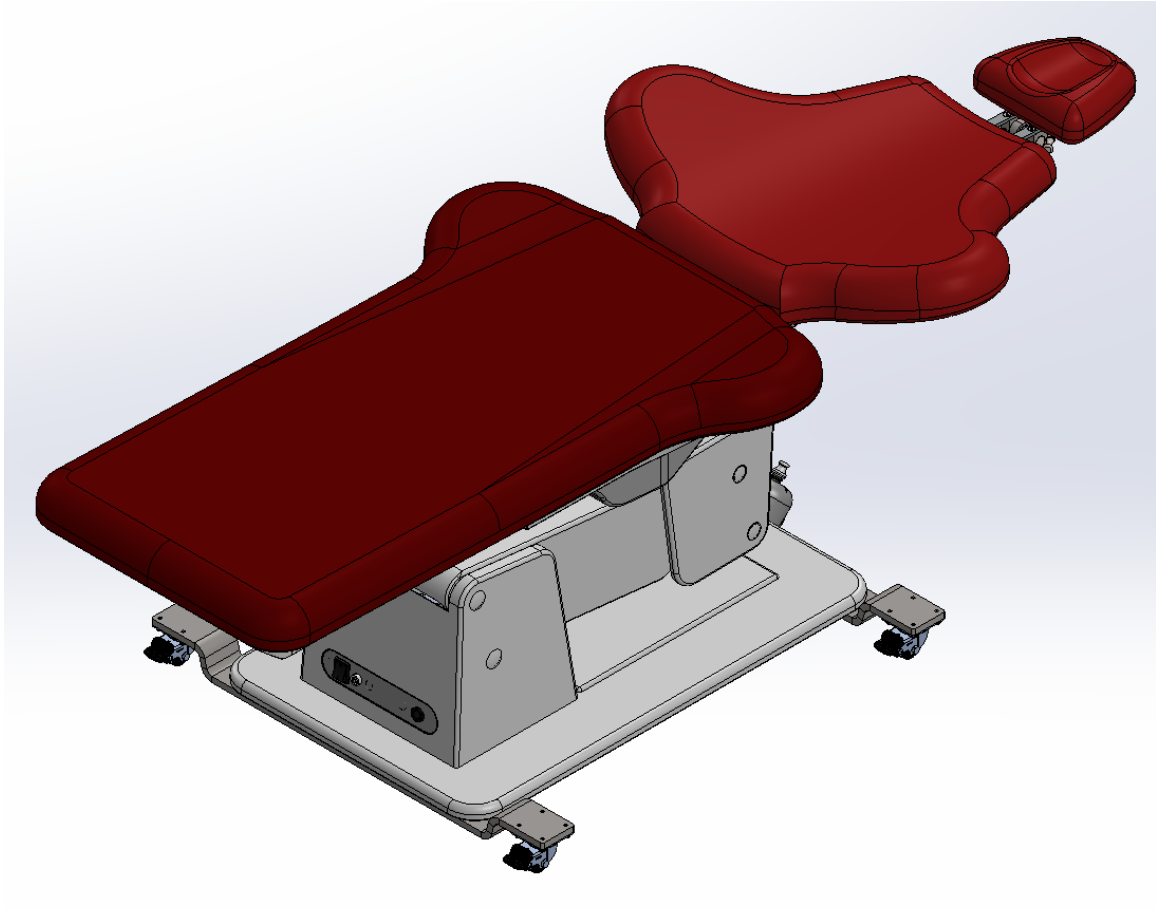


Mobile Kit Classic tillbehör till Patientstol samt Patientstol+

Beskrivning av utrustningen – SB-1390

Mobile Kit Classic till Patientstol (SB-0800) och Patientstol+ (SB-0820) är ett tillbehör bestående av ett hjulsats med fyra hjul, utformat för montering på patientstolen och – mellan tandvårdsbehandlingar – för att göra patientstolen fysiskt flyttbar.

Översikt över Mobile Kit Classic

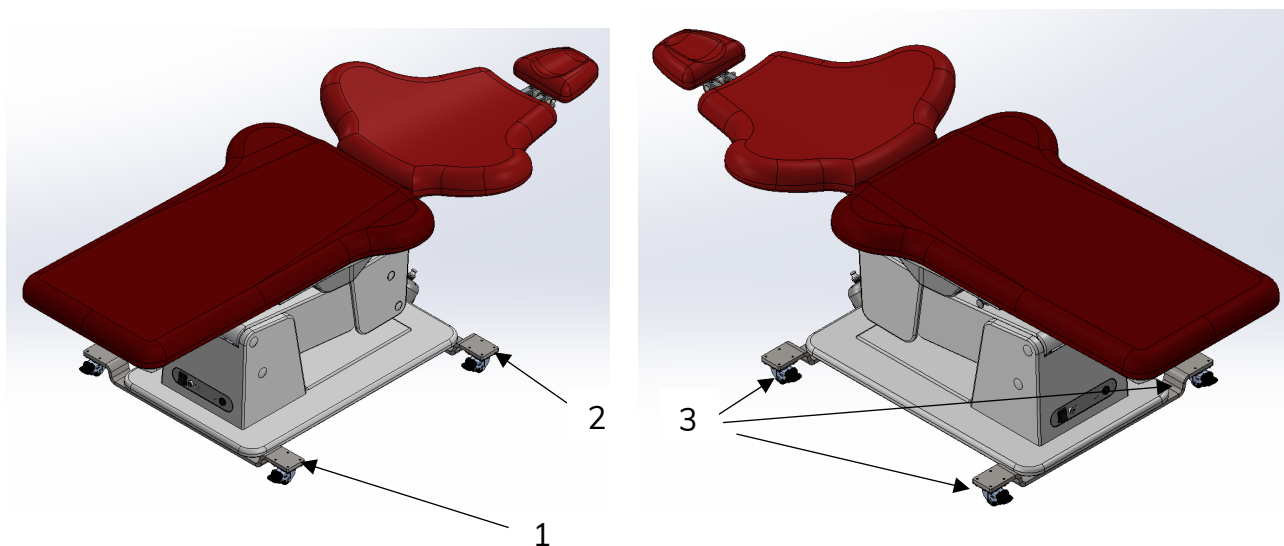

1	Hjulbeslag för patientfötter
2	Hjulbeslag för patientens huvudända
3	Hjul med broms på alla fyra hjulen

Säkerhetsanvisningar

De bifogade säkerhetsanvisningarna gäller uteslutande tillbehöret Mobile Kit Classic.

Observera de allmänna säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningarna för respektive Patientstol (KA-0033) och Patientstol+ (KA-0034).

Mobile Kit Classic får endast monteras på patientstolar som används på golv av betong, keramiska plattor eller annat icke-brännbart material i enlighet med ovan nämnda monteringsanvisningar (KA-0033 och KA-0034).

WARNING

Skadad kabel.

Elchock till följd av en skadad 230 V-kabel kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

- Kontrollera om 230 V-kabeln har skadats efter flytningen.
- Patientstolen får inte användas om 230 V-kabeln är skadad. Stäng omedelbart av patientstolen om den redan är påslagen.
- Kontakta en Heka Certified technician (HCT) om 230 V-kabeln behöver bytas ut.

CAUTION

Kollision

Kollision med patienter, möbler och annan utrustning kan orsaka mindre till måttliga personskador.

- Patientstolen med mobilkit monterat får inte flyttas/köras med patienter i den.
- Det får inte finnas patienter i rummet när patientstolen med monterat Mobile kit flyttas.
- Kontrollera att området är fritt från hinder innan patientstolen med monterat Mobile kit flyttas.
- Kontrollera att patientstolen med monterat Mobile kit är fränkopplad från annan utrustning innan hjulbromsarna slås av och stolen flyttas.
- Kontrollera att hjulen (alla fyra) är låsta när stolen med Mobile Kit monterat har flyttats till sin nya placering.
- Kontrollera att den nya placeringen av stolen med Mobile kit monterat har tillräckligt avstånd till väggar och övriga hinder, samt att avståndet till tandläkarutrustningen överensstämmer med bruksanvisningarna.

NOTICE

Begränsningar för patientens vikt

Patientstol (SB-0800) och Patientstol+ (SB-0820) är EN/ISO 6875-godkända för en belastning på 179 kg (398 lb).

Den maximala belastningen på 179 kg gäller även för patientstolar med Mobile Kit Classic monterat.

Om denna viktgräns överskrids kan patientstolen eventuellt inte fungera korrekt.

- Se till att inga patienter som överskrider viktgränsen placeras i patientstolen.

Introduktion till användning

Hjulbromsen aktiveras och avaktiveras med foten.



Hjulbromsen är aktiverad



Hjulbromsen är avstängd

För att flytta stolen:

- Koppla bort stolen från annan utrustning samt 230 V-kabeln
- Koppla ur hjulbromsen på alla fyra hjulen
- Skjut stolen långsamt med båda händerna

När stolen har flyttats:

- Placera stolen på rätt avstånd från tandläkarstolen och se till att hålla avstånd till väggar och andra hinder.
- Aktivera hjulbromsarna på alla fyra hjulen
- Anslut stolen enligt anvisningarna

Rengöring

Mobile kit rengörs enligt samma villkor som rekommendationerna för rengöring av patientstolen som beskrivs i respektive bruksanvisningar för Patientstol samt Patientstol+.

Årlig service

NOTICE

Årligt underhåll

Bristande underhåll kan leda till funktionsfel och orsaka materiella skador.

- Användaren ansvarar för att utrustningen genomgår årligt underhåll och för att löpande kontrollera att alla funktioner fungerar korrekt.
- Service och underhåll får endast utföras av en Heka Certified technician (HCt).
- Utför inte service eller underhåll med en patient sittande i stolen.

Vid årlig service kontrolleras:

- Bromsfunktionen på alla fyra hjulen.
- Ohindrad sväng- och rullrörelse på alla fyra hjulen.

HEKA

Heka Dental A/S
Litauen Alle 4
DK-2630 Taastrup
Denmark
T: +45 4332 0990
M: info@heka-dental.dk
heka-dental.com



Homepage



Facebook



LinkedIn



Instagram