


# BRUKSANVISNING

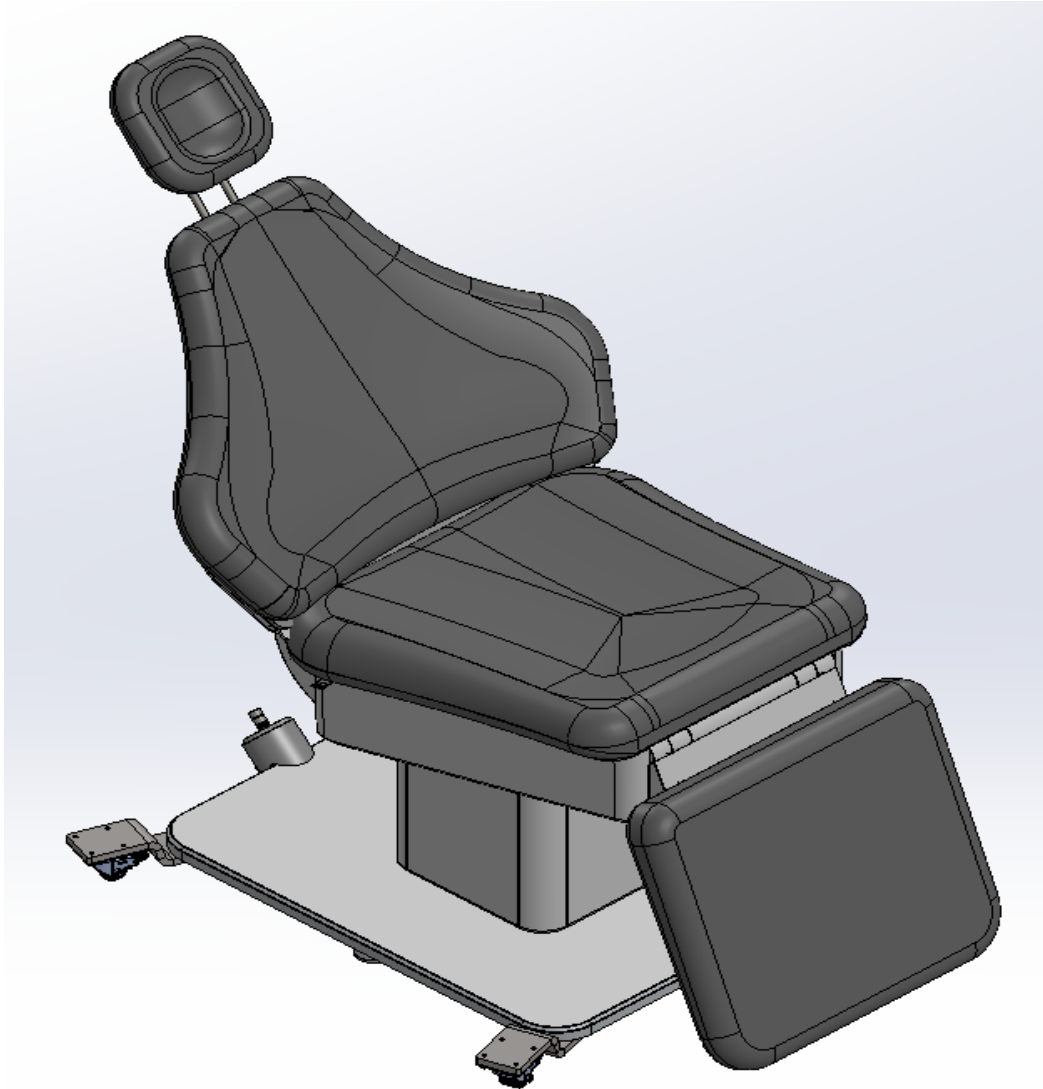


## **Mobile Kit Heka Patient Chair** tillbehör till Heka Patient Chair

## Beskrivning av utrustningen – SC-50708

Mobile Kit Heka Patient Chair är ett tillbehör bestående av ett hjulsats med fyra hjul, utformat för montering på patientstolen och – mellan tandvårdsbehandlingar – för att göra patientstolen fysiskt flyttbar.

## Översikt över Mobile Kit Heka Patient Chair

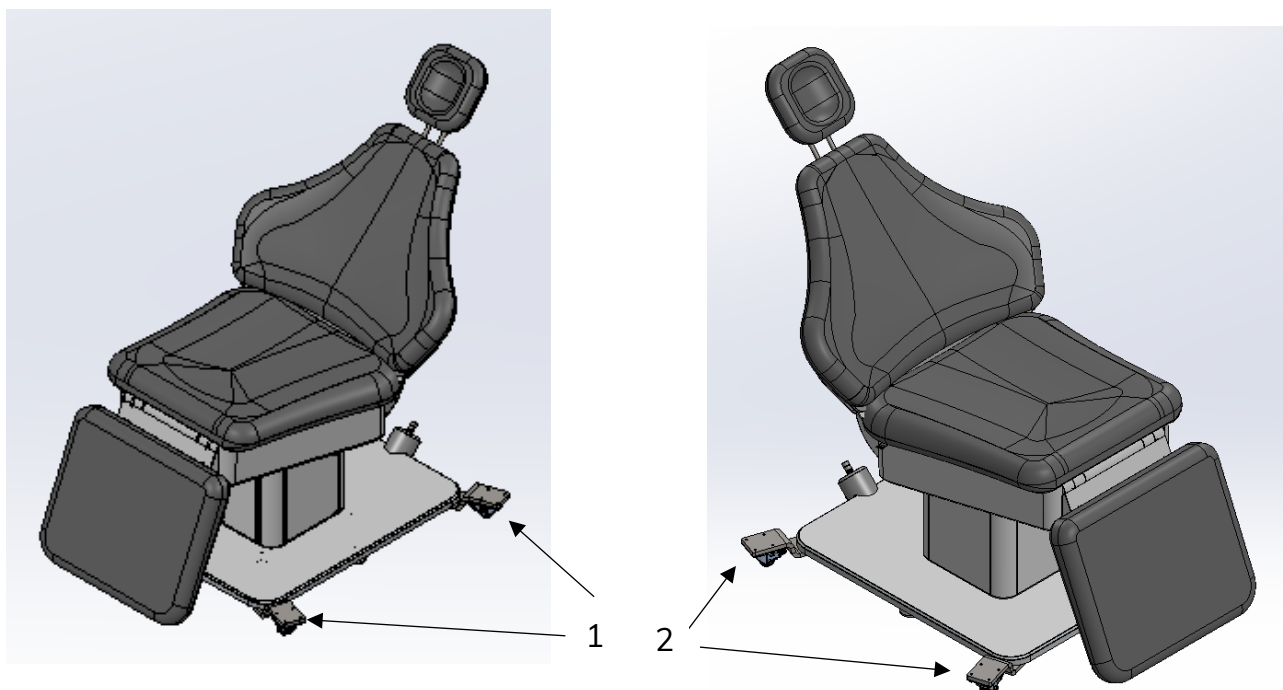

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | Hjulbeslag                         |
| 2 | Hjul med broms på alla fyra hjulen |

## Säkerhetsanvisningar

De bifogade säkerhetsanvisningarna gäller uteslutande tillbehöret Mobile Kit Heka Patient Chair.

Observera de allmänna säkerhetsanvisningarna i monteringsanvisningen (KA-2010) samt bruksanvisningen (KA-2050) för Heka Patient Chair.

Mobile Kit Heka Patient Chair får endast monteras på patientstolar som används på golv av betong, keramiska plattor eller annat icke-brännbart material i enlighet med ovannämnda monteringsanvisning (KA-2010).

### **WARNING**

#### **Skadad kabel.**

Elchock till följd av en skadad 230 V-kabel kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

- Kontrollera 230 V-kabeln för skador efter flytningen.
- Patientstolen får inte användas om 230 V-kabeln är skadad. Stäng omedelbart av patientstolen om den redan är påslagen.
- Kontakta en Heka Certified Technician (HCt) om 230 V-kabeln behöver bytas ut.

### **CAUTION**

#### **Kollision**

Kollision med patienter, möbler och annan utrustning kan orsaka mindre till måttliga personskador.

- Patientstolen med Mobile kit monterat får inte flyttas/köras med patienter i den.
- Det får inte finnas patienter i rummet när patientstolen med monterat Mobile kit flyttas.
- Kontrollera att området är fritt från hinder innan patientstolen med monterat Mobile kit flyttas.
- Kontrollera att patientstolen med monterat Mobile kit är fränkopplad från annan utrustning innan hjulbromsarna slås av och stolen flyttas.
- Kontrollera att hjulen (alla fyra) är låsta när stolen med Mobile kit monterat har flyttats till sin nya placering.
- Kontrollera att den nya placeringen av stolen med Mobile kit monterat har tillräckligt avstånd till väggar och övriga hinder, samt att avståndet till tandläkarutrustningen överensstämmer med bruksanvisningarna.

## **CAUTION**

### **Fästning av patientstolen vid demontering av Mobile Kit**

Om patientstolen inte fästs efter demontering av Mobile Kit kan det leda till mindre till måttliga personskador.

- Se till att patientstolen skruvas fast i golvet enligt monteringsanvisningarna (KA-2010) om Mobile Kit Heka Patient Chair demonteras och patientstolen inte längre ska vara flyttbar.

## **NOTICE**

### **Begränsningar avseende patientens vikt**

Heka Patient Chair är EN/ISO 6875-godkänd för en belastning på 200 kg (440,9 lb).

Den maximala belastningen på 200 kg gäller även för patientstolar med Mobile Kit Heka Patient Chair monterat.

Om denna viktgräns överskrids kan patientstolen eventuellt inte fungera korrekt.

- Se till att inga patienter som överskrider viktgränsen placeras i patientstolen.

## Introduktion till användning

Hjulbromsen aktiveras och avaktiveras med foten.



Hjulbromsen är aktiverad



Hjulbromsen är avstängd

### För att flytta stolen:

- Koppla bort stolen från annan utrustning samt 230 V-kabeln
- Koppla ur hjulbromsen på alla fyra hjulen
- Skjut stolen långsamt med båda händerna

### När stolen har flyttats:

- Placera stolen på rätt avstånd från tandläkarstolen och se till att hålla avstånd till väggar och andra hinder.
- Aktivera hjulbromsarna på alla fyra hjulen
- Anslut stolen enligt anvisningarna

## Rengöring

Mobile kit rengörs enligt samma villkor som rekommendationerna för rengöring av patientstolen som beskrivs i bruksanvisningen för Heka Patient Chair (KA-2050).

## Årlig service

### NOTICE

#### Årligt underhåll

Bristande underhåll kan leda till funktionsfel och orsaka materiella skador.

- Användaren ansvarar för att utrustningen genomgår årligt underhåll och för att löpande kontrollera att alla funktioner fungerar korrekt.
- Service och underhåll får endast utföras av en Heka Certified Technician (HCt).
- Utför inte service eller underhåll med en patient sittande i stolen.

Vid årlig service kontrolleras:

- Bromsfunktionen på alla fyra hjulen.
- Ohindrad sväng- och rullrörelse på alla fyra hjulen.

# HEKA

Heka Dental A/S  
Litauen Alle 4  
DK-2630 Taastrup  
Denmark  
T: +45 4332 0990  
M: info@heka-dental.dk  
heka-dental.com



Homepage



Facebook



LinkedIn



Instagram